

Thinking


VersaInserto[®]
SEATING SOLUTIONS



2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e' i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

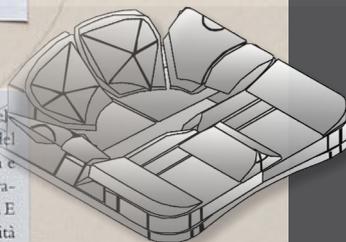

SEAT & BACK

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI
SOLUZIONI POSTURALI PER UTENTI **AMPUTATI**

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

SOLUZIONI POSTURALI SELEZIONATE PER GLI UTENTI CON AMPUTAZIONI, EMIPELVECTOMIE, FRATTURE DI FEMORE, FRATTURE ARTICOLARI FEMORE-BACINO, DISARTICOLAZIONI DELL'ANCA.



SVILUPPATE INSIEME AI CLINICI ED AGLI UTENTI PER:

BILANCIARE I CARICHI CORPOREI SUI TRE PIANI ORTOGONALI

MIGLIORARE LA FUNZIONE DI SPINTA E LE ADL (ACTIVITIES DAILY LIVING)

MINIMIZZARE L'INSTABILITA' POSTURALE DURANTE I MOVIMENTI E FAVORIRE IL COORDINAMENTO MUSCOLARE

FAVORIRE I TRASFERIMENTI DA E PER LA CARROZZINA

ACCELERARE IL PROCESSO RIABILITATIVO

MIGLIORARE I PROCESSI DI VASCULARIZZAZIONE

ADATTARSI ED ESSERE MODIFICATE ANCHE DOPO LA CONSEGNA

MIGLIORARE L'USO ED IL COORDINAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI

PREVENIRE DOLORI DI ORIGINE POSTURALE

PREVENIRE LE CONTRATTURE

SCHIUME POLIMERICHE ACCURATAMENTE SELEZIONATE....

KIT STRUTTURALE per la costruzione della seduta individuale allestita e approntata sull'utente




Polietilene combinato in differenti densità

Assorbe le vibrazioni e risponde con lento ritorno di memoria alle deformazioni. Estremamente leggero, permette modifiche con cutter.


KIT DI IMBOTTITURA *Forme Libere* per garantire perfetta aderenza al kit strutturale, al corpo e ai movimenti



Schiuma poliuretanica espansa flessibile ed elastica che supporta il movimento
Permette il ricircolo dell'aria.

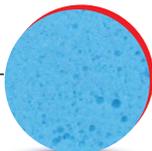

Schiuma poliuretanica viscoelastica flessibile a celle aperte
Antivibrante ed ammortizzante.

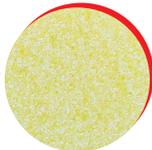

Schiuma poliuretanica antidecubito a ritorno lento di memoria
Aiuta la distribuzione delle pressioni e si adatta alla morfologia.

MATERIALI TESTATI PER OLTRE 15 ANNI

...E COMBinate PER

ALLEVIARE I CARICHI PRESSORI E PREVENIRE LE UDP (ULCERE DA PRESSIONE)

PROTEGGERE LE AREE SENSIBILI

SOSTENERE STABILMENTE IL CORPO

ACCOGLIERE E SOSTENERE LA MORFOLOGIA ANCHE IRREGOLARE E COMPENSARE LE PARTI MANCANTI

PREVENIRE ED ALLINEARE LE DEFORMITÀ


ADERIRE ALLA MORFOLOGIA DELL'UTENTE SIA IN STATICA CHE IN DINAMICA SENZA PERDERE LE PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE





PTS Pelvic Total Support

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino di uomini, donne e bambini e dei segmenti ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da decubito.

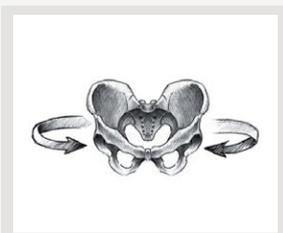


KIT STRUTTURALE PER CREARE LA FORMA E LA BASE STABILE

Personalizzazioni e modificazioni adattabili alle evoluzioni morfologiche dell'utente.



IMBOTTITURA *Forme Libere*


L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura. Kit imbottitura per distribuire i carichi in relazione al controllo posturale.

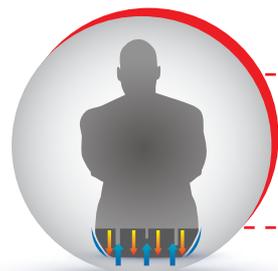

**STRUTTURA E IMBOTTITURA VENTILATE =
PREVENZIONE MACERAZIONE TISSUTALE**

Risultati Test

La distribuzione delle pressioni oscilla in un intervallo compreso tra i 0,20 PSI e i 3,87 PSI (9,83 mmHg e 126,79 mmHg), i colori evidenziano la distribuzione dei picchi pressori sul cuscino. Dall'immagine si evince una completa aderenza ed elevata superficie di appoggio dell'anatomicità del bacino alla seduta (superficie in blu).

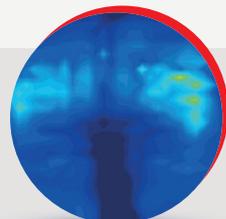

SOLUZIONI POSTURALI PER UTENTI A

- ✓ Utenti ad **ALTO** rischio sviluppo UDP
- ✓ Utenti in esiti di amputazione di coscia anche bilaterale
- ✓ Utenti in esiti di fratture di femore, femore-bacino, disarticolazione dell'anca



IMPULSO
inserto
SEAT



ECCEZIONALE BILANCIAMENTO ANTERO POSTERIORE E PRECISO ALLINEAMENTO MONCONE



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** E KIT STRUTTURALE CON FORI PER LA VENTILAZIONE



MASSIMO COMFORT

- ✓ Utenti a **MEDIO** rischio sviluppo UDP
- ✓ Utenti in esiti di amputazione di coscia

MODO
inserto
SPINE



COMPENSAZIONE ARTO MANCANTE



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



LEGERISSIMO, COMODO, SICURO, BASSO PROFILO LATERALE

- ✓ Utenti ad **ALTO** rischio sviluppo UDP
- ✓ Utenti in esiti di emipelvectomy
- ✓ Utenti in esiti di disarticolazione dell'anca
- ✓ Utenti in esiti di paraosteartropatia (POA)



NOVO
inserto
SPINE



PERFETTA ADERENZA ALLA MORFOLOGIA ED ECCEZIONALE COMPENSAZIONE DELL'EMIBACINO



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



STABILITÀ E CONTROLLO POSTURALE

- ✓ Utenti ad **ALTO** rischio sviluppo UDP
- ✓ Utenti in esiti di emipelvectomy anche bilaterale
- ✓ Utenti in esiti di disarticolazione dell'anca
- ✓ Utenti di cui sopra con estrema necessità di controllo del tronco

TANTO
inserto
SEAT



STABILITÀ E CONTROLLO POSTURALE ECCEZIONALI



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere**



STRAORDINARIO CONTROLLO DEL TRONCO

Le indicazioni riportate hanno uno scopo informativo e non sostituiscono la completa analisi clinica, delle necessità dell'utente nella scelta del sistema di postura e della prescrizione, che rimane sempre e comunque a carico del prescrittore.

DAL BACINO AL TRONCO

Abilità, funzione e postura strettamente collegate, abbinate al massimo confort
La postura del tronco inizia dal bacino. Dal P.T.S. (Pelvic Total Support) la naturale evoluzione T.T.S. (Trunk Total Support). Controllo latero-posteriore del tronco perfettamente adattabile.

TTS Trunk Total Support

Perfetta aderenza al rachide lungo tutti i suoi tratti, i suoi piani, ed i segmenti ad esso correlati, per garantire le performance funzionali e FORME ACCOLTE sempre. La distribuzione dei carichi d'appoggio fornita dal TTS è sinonimo di confort.

Intervento posturale combinato



+




Rachide Cervicale

Rachide toracico

Rachide lombare

Sacro

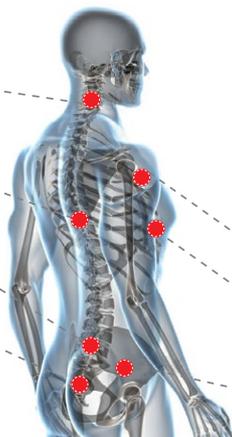

Articolazione spalla

Cassa toracica

Bacino

KIT STRUTTURALE

costituito da una base di costruzione ed inserti modulari presagomati

KIT IMBOTTITURA

incrementa l'aderenza e la stabilità accogliendo tutte le forme

- ✓ Utenti con LIEVE necessità di allineamento



SCOCCA SAGOMATA SEMIRIGIDA CON AVVOLGENZA LATERALE



COMBINAZIONE DI SOFFICE IMBOTTITURA E SOSTEGNO SEMIRIGIDO=COMFORT GARANTITO



MULTI TENSIONABILE

- ✓ Utenti con MODERATA/ALTA necessità di Contenimento/Allineamento



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE CON 6 INSERTI



COMBINAZIONE DI SOFFICE IMBOTTITURA E SOSTEGNO SEMIRIGIDO=COMFORT GARANTITO



MULTI TENSIONABILE

- ✓ Utenti con disallineamenti pelvico rachidei medio gravi
- ✓ Utenti che beneficiano dell'utilizzo di supporti toracici e/o poggiatesta



CONTIENE SENZA COSTRINGERE



8 INSERTI MODULARI MODIFICABILI



SUPPORTA L'ANATOMIA

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni e
le pubblicazioni delle ricerche svolte all'indirizzo
info@promedicare.it



PRODOTTO DA:



Pro Medicare srl

Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY

Tel. +(39) 0831 777840

Fax. +(39) 0831 730739

Email: sales@promedicare.it


www.versainserito.com

www.promedicare.eu


AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

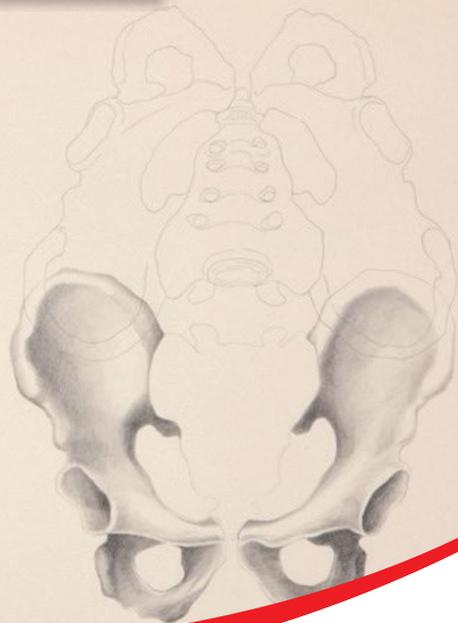

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserito.com