

TThinking

VersaInserto
SEATING SOLUTIONS

B A C K



2 A Teschio e denti, 1489.


RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'l vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



SOLUZIONI POSTURALI PER IL TRONCO PERSONALIZZABILI INDIVIDUALMENTE

T.T.S. (The Trunk Total Support)

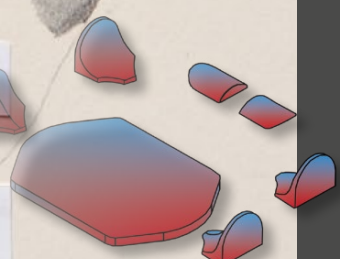


POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI


UN MONDO DENTRO UNO SCHIENALE:

VESTIBILITÀ PERFETTA CHE ACCOGLIE:

- rachide uomo, donna, adulto e bambino
- deformità differenti e combinate
- molteplici morfologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo

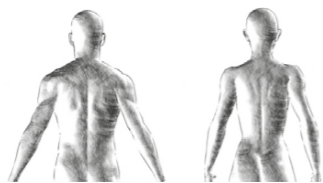

OGNI MODELLO INCLUDE NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD:

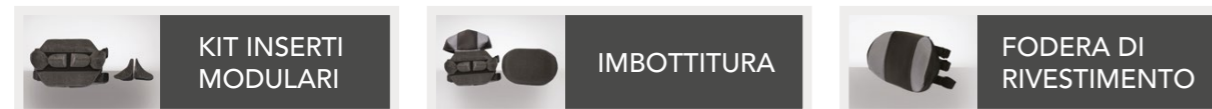

STRUTTURA E MATERIALI PER CONSENTIRE ALLINEAMENTO, CONTROLLO DELLA POSTURA, DISTRIBUZIONE DELLE PRESSIONI E COMFORT.

KIT STRUTTURALE per la costruzione della configurazione posturale individuale allestita e approntata sull'utente



Polietilene combinato in differenti densità
Assorbe le vibrazioni e risponde con lento ritorno di memoria alle deformazioni. Estremamente leggero, permette modifiche con cutter.

IMBOTTITURA per garantire perfetta aderenza al kit strutturale, al corpo e ai movimenti



Schiuma poliuretana espansa flessibile ed elastica
Supporta il movimento e permette il ricircolo dell'aria.



Schiuma poliuretana antidecubito a ritorno lento di memoria*
Aiuta la distribuzione delle pressioni e si adatta alla morfologia.



Schiuma polimerica automodellante*
Ammortizzante ed a lento rilascio di memoria




Schiuma poliuretana reticolata
Permette il ricircolo dell'aria.

n.b.* Presente su alcuni modelli

RIVESTIMENTO



Microclimatico areato, Favorisce la traspirazione.

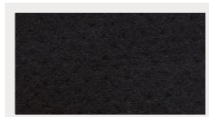

Traspirante, elastico.



Trasportabilità in veicoli a motore
Crash Test - ISO 7176-19


n.b. valido per alcuni modelli

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.promedicare.eu

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

RISPOSTE REALI A BISOGNI SPECIALI

Impegnati da anni a sviluppare soluzioni posturali per rispondere alle esigenze più complesse in collaborazione con gli utenti, clinici, tecnici e care givers.

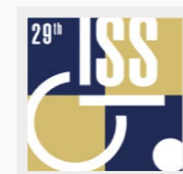

Le nostre ricerche e i nostri lavori sono stati accettati nei più importanti congressi, sia in Italia che all'estero.

TTS (TRUNK TOTAL SUPPORT) UN INNOVATIVO APPROCCIO ALLA POSTURA

CONCETTO:

Supporto Totale del sistema di relazione Bacino/Rachide/Cassa Toracica di Uomini, Donne e Bambini.

METODO:

Bilanciamento del sistema di relazione Bacino/Rachide/Cassa Toracica e dei carichi intervertebrali, attraverso il contenimento ed il controllo latero-posteriore del tronco, partendo dal bacino e dal tratto lombare.

TECNOLOGIA:

Struttura modulare composta da una base piatta di costruzione ed inserti presagomati indipendenti che assemblata si adatta a ogni forma, misura e morfologia di una persona seduta.



FACILE COME UN PUZZLE


FORME ACCOLTE sempre. Abilità, funzioni e postura sono strettamente correlate.

L'innovativo sistema di posizionamento integrato **FORME ACCOLTE** consente il perfetto adattamento al bacino ed al tronco e confort superiore. La postura del tronco inizia dal bacino. Dal P.T.S. (Pelvic Total Support) la naturale evoluzione T.T.S. (Trunk Total Support). Controllo latero-posteriore del tronco perfettamente adattabile. Accoglienza delle forme, sostegno dei cedimenti del tronco ed allineamento posturale come il compiersi dell'azione delle nostre mani. I principi ortesici in una linea di schienali estremamente performanti.

INTERVENTO POSTURALE COMBINATO



Le deformità del rachide sono molteplici e combinate P.T.S. e T.T.S. insieme per risolvere.

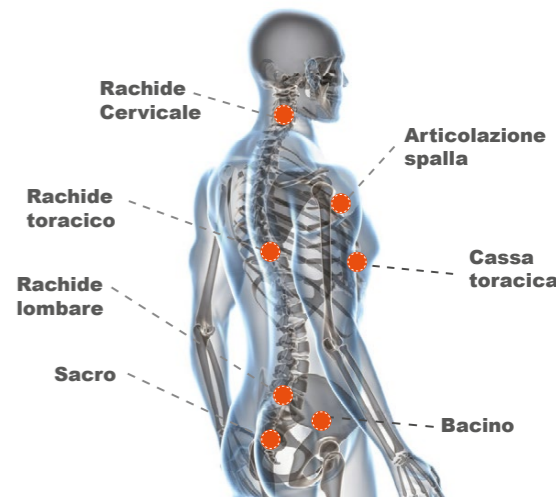

La Tecnologia **FORME ACCOLTE**, mediante il risultato di un attento design degli inserti, esplica l'azione di spinta e contenimento in armonia con la sagomatura delle scocche esterne per una vestibilità più idonea all'utente. **FORME ACCOLTE**: Il sistema di postura per il tronco costruito nel kit di rivestimento per incrementare l'aderenza alla forma corporea e la stabilità nell'appoggio in ogni situazione di utilizzo.

FACILE
inserto
BACK



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. PARAPLEGIE, TETRAPLEGIE)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, SLA, PARKINSON)
- ✓ CEREBROLESIONI (ES. ICTUS, PCI)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE E NEUROMUSCOLARI (ES. LEUCODISTROFIE)

CONCO
inserto
BACK



**BAMBINO
ADULTO**

- ✓ PATOLOGIE GENETICHE E NEUROMUSCOLARI (ES. SPINA BIFIDA, SMA, DISTROFIE, LEUCODISTROFIE, MALATTIA DEL MOTONEURONE)

VIP
inserto
BACK



**ADULTO
ANZIANO**

- ✓ CEREBROLESIONI (ES. PCI, TC)
- ✓ LESIONI MIDOLLARI
- ✓ SLA
- ✓ PAZIENTI GERIATRICI

SUPPORTO
inserto
BACK



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ LESIONI DI ORIGINE TRAUMATICA E NON (ES. TETRAPLEGIE)
- ✓ PATOLOGIE GENETICHE E NEUROMUSCOLARI (ES. SPINA BIFIDA, SMA, DISTROFIE, LEUCODISTROFIE, MALATTIA DEL MOTONEURONE, SINDROME DI RETT)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, SLA, PARKINSON, ALZHEIMER)
- ✓ CEREBROLESIONI (ES. TC, ICTUS, PCI)

EFFECTO LATO
inserto
BACK



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ PATOLOGIE GENETICHE E NEUROMUSCOLARI (ES. SMA, DISTROFIE, LEUCODISTROFIE, MALATTIA DEL MOTONEURONE, SINDROME DI RETT)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, SLA)
- ✓ CEREBROLESIONI (ES. TC, PCI)



EFFECTO PLUS
inserto
BACK



**BAMBINO
ADULTO
ANZIANO**

- ✓ PATOLOGIE GENETICHE E NEUROMUSCOLARI (ES. SPINA BIFIDA, SMA, DISTROFIE, LEUCODISTROFIE, MALATTIA DEL MOTONEURONE, SINDROME DI RETT)
- ✓ PATOLOGIE DEGENERATIVE (ES. SM, SLA)
- ✓ CEREBROLESIONI (ES. TC, PCI)

MODELLO		FACILE	CONCO	VIP	SUPPORTO	EFFECTO LATO	EFFECTO PLUS
UTENTE	CAPACITÀ DI SPINTA AUTONOMA	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	NO	NO
	RISCHIO IPERCARICO PRESSORIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
DEFORMITÀ	CAPACITÀ ALLINEAMENTO	MODERATA / ALTA	MODERATA / ALTA	MODERATA / ALTA	MODERATA / ALTA	ALTA	ALTA
	CAPACITÀ CONTENIMENTO	MODERATA / ALTA	ALTA	ALTA	MODERATA / ALTA	ALTA	ALTA
CARATTERISTICHE	INTEGRAZIONE ACCESSORI	NESSUNO	NESSUNO	SUPPORTI TORACICI (interni allo schienale)	SUPPORTI TORACICI	SUPPORTI TORACICI	/
	REGOLAZIONE RIGIDITÀ SUPPORTO POSTURALE	SI	SI	SI	POGGIATESTA BRETTELLAGGI	POGGIATESTA BRETTELLAGGI	POGGIATESTA BRETTELLAGGI
	CRASH TESTED ISO 7176-19	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		NO	NO	NO	SI	SI	SI

Le indicazioni riportate hanno uno scopo informativo e non sostituiscono la completa analisi clinica, delle necessità dell'utente nella scelta del sistema di postura e della prescrizione che rimane sempre e comunque a carico del prescrittore.

Richiedi **maggiori informazioni** sulle soluzioni e le **pubblicazioni** delle ricerche svolte all'indirizzo info@promedicare.it





PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485

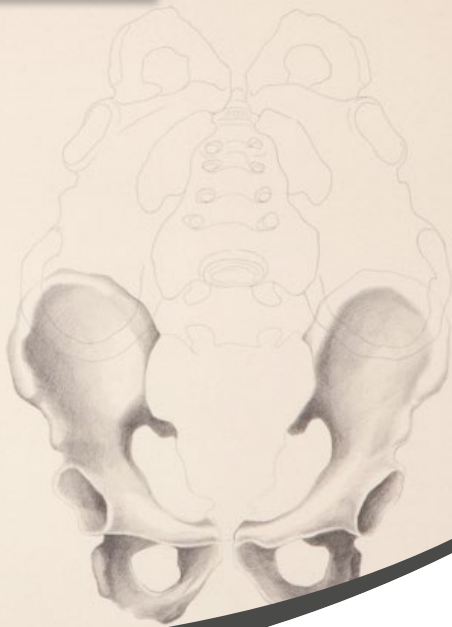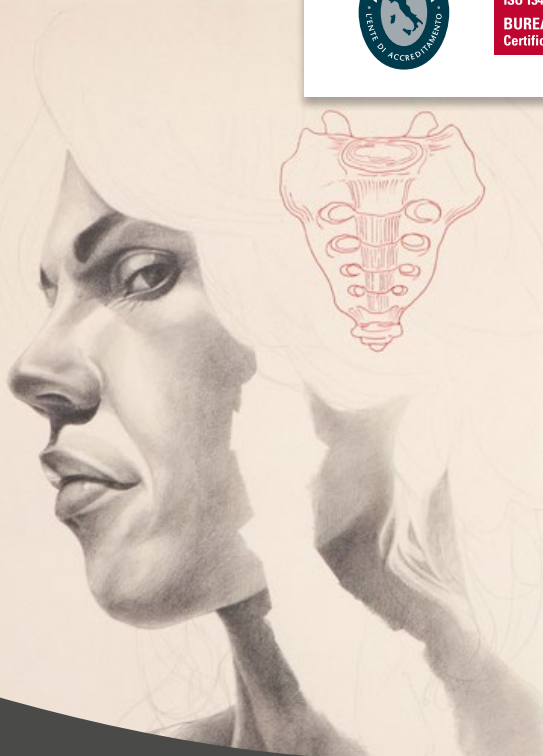

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com