ム M M

JNA NUOVA SOLUZIONE THE TRUNK TOTAL SUPPORT

# UNA NUOVA SOLUZIONE TTS TRUNK TOTAL SUPPORT

### Kit posturale per il tronco ad inserti modulari



## Perchè Cobble ?

- VERSATILITÀ, ADATTABILITÀ
- ECCELLENTI PERFORMANCES DI PERSONALIZZAZIONE
- COMFORT, LEGGEREZZA, PROTEZIONE
- SUPPORTO PER DEFORMITÀ GRAVI ED INSTABILITÀ LATERALE DEL TRONCO



SCOCCA METALLICA CON
KIT STRUTTURALE COMPOSTO DA
UN NUMERO DI INSERTI VARIABILE



IMBOTTITURA BIACCOPPIATA IN SCHIUMA POLIURETANICA MEMORY FOAM E RETICOLATA LAVABILE



FODERA DI RIVESTIMENTO IN LYCRA/NEOPRENE PERFORATO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Due versioni disponibili, si differenziano tra loro per lo spessore degli inserti modulari presenti all'interno:

Versione slim spessore 2 cm

Versione plus spessore 4+2 cm

- Scocca Metallica con kit strutturale composto da un numero di inserti variabile in funzione della misura dello schienale, in polietilene a celle chiuse.
- Imbottitura biaccoppiata in schiuma poliuretanica memory foam e reticolata lavabile
- Fodera di rivestimento in tessuto lycra/neoprene perforato ed elastomero antibatterico, latex free a basso rischio di irritazione per la pelle

**RICAMBI** 

Fodera di rivestimento

#### **AVVERTENZE**

L'Unità Posturale Inserto Back Cobble, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.


In alternativa

La messa in servizio dell'Unità Posturale Inserto Back Cobble, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

#### INDICAZIONI CLINICHE E D'USO

- Versione slim: Utenti non deambulanti con discreto controllo del tronco e deformità meno gravi
- Versione plus: Utenti non deambulanti con scarso controllo del tronco e deformità gravi/gravissime



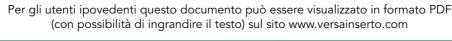



## OBBLE






### Inserto Cobble

INSERTI MODULARI MODIFICABILI



FODERA DI RIVESTIMENTO CON ELASTOMERO ANTIBATTERICO, LATEX FREE E A BASSO RISCHIO DI IRRITAZIONE CUTANEA

TABELLA MISURE INSERTO COBBLE											MISURE (cm)	
MODELLO		3033	3338	3642	3650	3945	3952	4245	4250	4550	4855	
Altezza scocca		33	38	42	50	45	52	45	50	50	55	
Larg. est-est tubi carrozzina (cm) min/max		27/33	30/36	33/39	33/39	36/42	36/42	39/45	39/45	42/48	45/51	
Numero inserti	Vers. Slim	20	20	20	24	20	24	24	24	30	30	
	Vers. Plus	40	40	40	48	40	48	48	48	60	60	

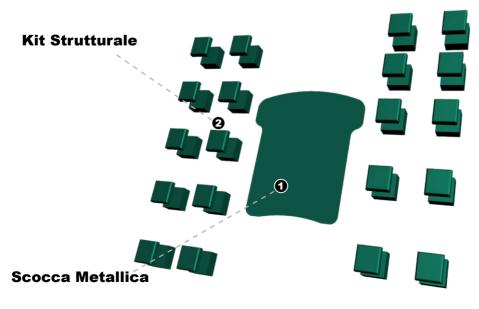

N. REG. MINISTERO: 2869035 (Slim) - 2869195 (Plus)



#### **DISTRIBUITO DA:**

**C€** GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com