



prestante per **passione**



DESCRIZIONI **ADACTA LIGA**

L'ADACTA LIGA è la base per sistemi di postura realizzata in lega di alluminio anodizzato per garantire leggerezza e durata nel tempo.

L'assenza di saldature rende la base più sicura.


La base ADACTA LIGA, data la sua modularità, si presenta con una molteplicità di configurazioni in grado di seguire l'evoluzione della patologia, della crescita somatica e dei conseguenti adattamenti posturali

La base ADACTA LIGA può essere conformata in base alle necessità dell'utilizzatore finale agendo su :


- traslazione della sovrastruttura (che accoglie il sistema di postura) rispetto al sottotelaio
- traslazione delle ruote posteriori garantendo le condizioni di sicurezza (come previsto dal manuale).

BASI PER POSTURA **ADACTA LIGA**

"UNA SCELTA DI MODULARITÀ, VERSATILITÀ E LEGGEREZZA"

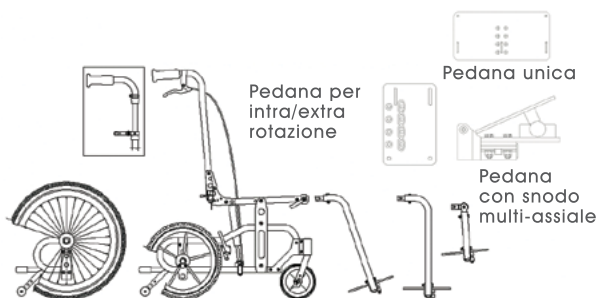

"UNA SCELTA DI SICUREZZA"

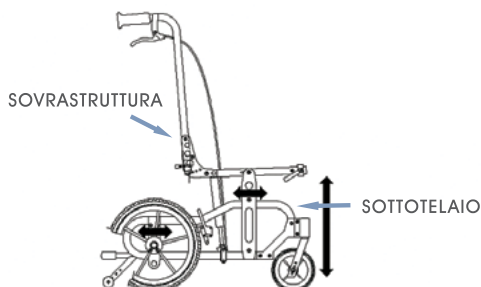


La più **STABILE** e **RESISTENTE** delle basi per sistemi di postura



CRASH TEST

Per trasporto in auto si consiglia l'uso del poggiatesta

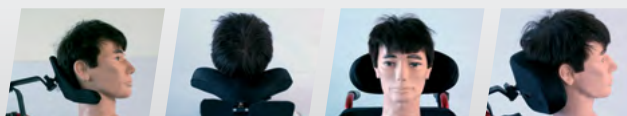

DIMENSIONE TELAI

MISURA (mm.)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
US	300	380
XXS	350	380
XS	350	420
XS1	380	460
S	410	460
M	410	500
M1	440	500
L	470	460
XL	470	500

PARTI FONDAMENTALI

caratteristiche tecniche

- Struttura portante Adacta Liga rigida o chiudibile
cod. ISO 18.09.39.006, ISO 18.09.39.103
in alternativa ISO 12.21.06.060
(riconducibile per omogeneità funzionale)
- Basculamento continuo da 0° a 30° e su richiesta -5°
(mediante molla a gas)
- Reclinazione meccanica (3° - 9° - 15° - 22°)
- Montanti schienale abbattibili
- Traslazione continua della sovrastruttura rispetto al sottotelaio
- Traslazione continua delle piastre ruote posteriori
- Ruotine antiribaltamento
- Regolazione assetto (da 410 mm a 490 mm)

PARTI OPZIONABILI

caratteristiche tecniche

- Ruotine anteriori disponibili da:
 - 125mm piene
 - 150mm piene o pneumatiche
 - 175mm piene

- Ruote posteriori ad estrazione rapida disponibili da:
 - 300mm piene o pneumatiche
 - 500mm piene o pneumatiche con corrimano
 - 600mm pneumatiche con corrimano

- Freni disponibili:
 - a tamburo
 - a leva
 - a leva + tamburo
- Angolo ginocchio
 - 90° o 75°
 - regolabile in elevazione con meccanismo dentellato
 - regolabile in adduzione/abduzione
 - verticale e telescopico regolabile in elevazione

- Poggiapiedi disponibili:
 - separato cod. ISO 18.09.39.036
 - separato con la possibilità dell'asolatura per intra-extra rotazione cod. ISO 18.09.39.166 x 2
 - separato con snodo multiassiale cod. ISO 18.09.39.166 x 2
 - unico (ad estrazione facilitata) cod. ISO 18.09.39.033

- Manici di spinta
 - telescopici ed orbitali
- Kit trasporto auto



ACCESSORI

- Base sedile in legno
- kit braccioli tubolari ribaltabili/inclinabili regolabili in altezza
- kit spondine regolabili in altezza, profondità estraibile con appoggi multi regolabili
- Contenitori al bacino linea Versa
cod. ISO 18.09.39.139
- Unità posturali arti superiori linea Versa
cod. ISO 18.09.39.030 x 2
- Appoggia polpacci (unico separato)
cod. ISO 18.09.39.169 (riconducibile)
- Poggiagambe a cassetta
- Fascia poggipolpacci imbottita semirigida o con velcro
- Fissatore mesopiede imbottito con fissaggio a velcro
- Cinghia pelvica linea Versa Fixatis
cod. ISO 18.09.39.163
- Cinghia divaricatrice linea Versa Fixatis
cod. ISO 18.09.39.157
- Tavolini
cod. ISO 18.09.39.172

La dotazione di accessori permette di configurare il sistema in funzione delle esigenze dell'utilizzatore

ASSETTO

Diversi gli assetti disponibili.

(in base alla configurazione di ruote prescelta)

Altezza:

410mm, 430mm, 450mm, 470mm, 490mm.

COLORI

ADACTA LIGA è disponibile in 5 colori

BLU	ROSSO	VERDE	TURCHESE	MAGENTA
				



adacta[®]
base per sistemi di postura



MANICI TELESCOPICI ED ORBITALI



RECLINAZIONE MECCANICA SEDILE/SCHIENALE PER MEZZO DI QUICK RELEASE



LEVA DI AZIONAMENTO DEL BASCULAMENTO




RUOTINE ANTI RIBALTAMENTO




SPONDINE REGOLABILI CON BRACCIOLE



BASE SOLIDA IN LEGNO

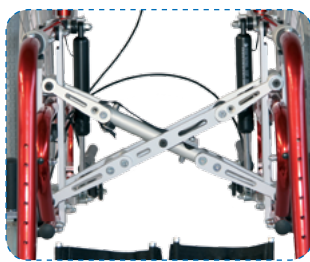

CROCIERA STABILIZZANTE

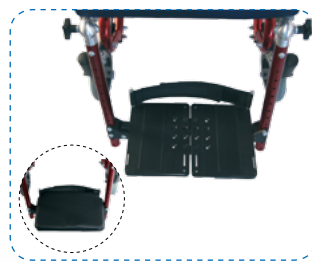

POGGIAPIEDI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LARGHEZZA (mm)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL	PORTATA (kg)	CHIUDIBILE		RIGIDO		PESO TELAIO (kg)	CHIUDIBILE		RIGIDO	
RUOTA 300mm.	standard	480	530	530	560	590	590	620	650	650	US	50	50	50	50	US	12,2	11,6		
	c/freno a tamburo	490	540	540	570	600	600	630	660	660		XXS	50	50	50		50	XXS	12,4	11,8
RUOTA 500mm.	standard	500	550	550	580	610	610	640	670	670	XS	50	50	50	50	XS	12,8	12,2		
	c/freno a tamburo	530	580	580	610	640	640	670	700	700		XS1	75	75	75		75	XS1	12,9	12,4
RUOTA 600mm.	standard	/	550	550	580	610	610	640	670	670	S	75	75	75	75	S	13	12,5		
		M	75	100	100	100	100	100	M	14	13,5									
		M1	75	100	100	100	100	100	M1	14,5	14									
		L	75	100	100	100	100	100	L	13,5	13									
		XL	75	100	100	100	100	100	XL	15	14,5									



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ingombro in lunghezza (mm)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL	
RUOTA 300mm	SNODO	L	700	700	730	770	770	810	810	770	810
	POGG.75°	L	680	680	710	730	730	760	760	730	760
		L.min	880	880	910	970	970	1000	1000	970	1000
		L.max	990	990	1000	1040	1040	1070	1070	1040	1070
	POGG.90°	L	680	680	710	730	730	760	760	730	760
		L.min	880	880	910	930	930	960	960	930	960
L.max		940	960	990	1000	1000	1030	1030	1000	1030	
RUOTA 500mm	SNODO	L	780	780	810	850	850	890	890	850	890
	POGG.75°	L	750	750	780	800	800	820	820	800	820
		L.min	950	950	980	1030	1030	1060	1060	1030	1060
		L.max	1030	1030	1070	1130	1130	1160	1160	1130	1160
	POGG.90°	L	750	750	780	800	800	820	820	800	820
		L.min	950	950	980	1000	1000	1030	1030	1000	1030
L.max		970	970	1000	1060	1060	1090	1090	1060	1090	
RUOTA 600mm	SNODO	L	/	830	840	880	880	920	920	880	920
	POGG.75°	L	/	800	830	850	850	870	870	850	870
		L.min	/	1010	1030	1080	1080	1110	1110	1080	1110
		L.max	/	1090	1120	1160	1160	1200	1200	1160	1200
	POGG.90°	L	/	800	830	850	850	870	870	850	870
		L.min	/	1010	1030	1050	1050	1180	1180	1050	1180
L.max		/	1050	1080	1120	1120	1160	1160	1120	1160	

Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferite ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. Non sono state riportate Lmax ed Lmin relative alla versione con snodo ginocchio perchè dipende dalla sua inclinazione.

NB: i prodotti della linea ADACTA sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del ministero della salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)

CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER IL NUMERO DI REPERTORIO



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Montagna Z . I . L o t t o 4 1
c.a.p. 72023 Mesagne (Br) - ITALY
Tel . (+39) 0831.777840
Fax . (+39) 0831.730739
Sito web: www.promedicare.it
e mail: info@promedicare.it

