

- Scheda Tecnica HIPPO MB Pad Posturale Modulare per Ippoterapia -

<u>Identificazione Fabbricante</u>	<p>Pro Medicare S.r.l. Via Montagna Z.I. Lotto 41 72023 Mesagne (Br) P IVA 01803920741 Tel. 0039 0831 777840 Fax 0039 0831 730739 sito web: www.promedicare.eu email: info@promedicare.it</p>
<u>Denominazione commerciale</u>	HIPPO MB
<u>Identificativo UDI-DI BASIC</u>	805571347HIPPOEM
<u>Codice dispositivo</u>	D02-701-1 chiusura sottopancia a destra D02-702-1 chiusura sottopancia a sinistra
<u>Numero di registrazione ministero/Repertorio</u>	2149978
<u>Codice di classificazione (CND)</u>	Y180839
<u>Classe dispositivo medico</u>	<i>Il pad posturale modulare HIPPO MB è marcato CE secondo il Regolamento UE 2017/745 ed è un dispositivo medico di classe I non sterile.</i>
<u>Destinazione d'uso</u>	<p><i>HIPPO MB è un confortevole pad posturale modulare, dotato altresì di sottopancia e maniglione flessibile atto alla esecuzione del trattamento di riabilitazione equestre. Il pad posturale modulare HIPPO MB è stato progettato per essere utilizzato durante una seduta di Terapia Assistita con il cavallo, detta anche Riabilitazione Equestre, Ippoterapia.</i></p> <p><i>Il pad posturale modulare HIPPO MB, si presenta con una molteplicità di elementi posturali personalizzabili secondo le necessità dell'utilizzatore finale e dei conseguenti adattamenti posturali con riferimento sia alla posizione supina e prona che a quella seduta.</i></p> <p><i>L'intero dispositivo è stato concepito per consentire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la distribuzione omogenea delle pressioni;</i> - <i>il contenimento ed allineamento posturale;</i> <p><i>L'utilizzo combinato ed armonico degli elementi inferiore e superiore unitamente agli elementi posturali a seconda della posizione, seduta o distesa (supina/prona) è stato pensato per favorire un appoggio posturalmente corretto, sicuro e confortevole per l'utilizzatore finale.</i></p>

Caratteristiche tecniche

Il pad posturale modulare HIPPO MB è composto da:

- Elemento inferiore e superiore;
- Posizionatore capo;
- Kit Posizionatore bacino;
- Kit Posizionatore tronco di spinta;
- Kit Posizionatore tronco accogliente;
- Abduttore;
- Kit Guide posizionate condilo/femorali;
- Kit Pomelli di tenuta per le mani;
- Kit Posizionatori flessione ginocchia;
- Sottocoda

DIMENSIONI: Dimensioni PAD: Lunghezza x Larghezza: 105x90 [cm]/41.33x35.43 [in]

PESO: 4,5 kg/9.92 [lb]

PORTATA MAX: 60 kg/132.2 [lb]

Per il dettaglio della configurazione standard e dei relativi accessori/ricambi fare riferimento al relativo modulo d'ordine.

PRESTAZIONI E DURATA:

La durata del mantenimento delle prestazioni, in condizioni di sicurezza, dei dispositivi in oggetto è definito pari a 2 anni (imbottiture) validi alle normali condizioni d'uso e alla corretta manutenzione secondo quanto previsto dal manuale.

MATERIALI:

L'intero sistema è realizzato in materiale polimerico e combina differenti caratteristiche di densità, elasticità, portanza e memoria di forma; il tutto è rivestito con diversi tessuti a composizione combinata:


- Nylon/Lycra nel caso dell'elemento superiore;
- Poliammide, Elastan, Silicone, Nylon/Lycra per l'elemento inferiore;
- PU/PES nel caso dei rivestimenti degli elementi posturali. Tali rivestimenti presentano le seguenti caratteristiche:
 - antibatterico, non citotossico, non irritante
 - resistente alla penetrazione di virus
 - antifungo, ignifugo, biocompatibile
 - certificato OEKO-TEX®, privo di lattice
 - traspirante, impermeabile, lavabile e igienizzabile

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Il rivestimento dell'elemento superiore e inferiore, essendo sfoderabile, può essere lavato a mano con acqua calda (30°C) e successivamente asciugato all'aria. Il rivestimento degli elementi posturali può essere sterilizzato lavandolo a 95° ed igienizzabile con i seguenti detergenti/disinfettanti:

- PERSIL EXPERT coldzyme/HENKEL
- 70% etanol
- PERFORM/Schuelke
- TPH PROTECT/Schuelke
- MIKROZID AF liquid/Oktalpharma
- INCIDIN PLUS/Ecolab
- DESCOGEN liquid/Antiseptica
- MANORAPID/Antiseptica
- PLIVASEPT/Pliva

NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRODOTTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO.

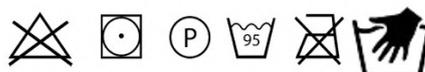

Lavaggio a mano
temperatura massima 30°

NON UTILIZZARE ASCIUGATRICI PER AVERE UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO.

CONFEZIONAMENTO:

Viene fornito all'interno della sua borsa porta PAD con gli elementi posturali posti nella valigetta in plastica e confezionato singolarmente in cartone.

HIPPO MB prevede i seguenti accessori:

- Fascia poggipiedi
- Sacca porta oggetti
- Borsa porta PAD (previsto anche in configurazione standard)
- Rivestimento igienico protettivo per maniglioni e per il PAD
- valigetta in plastica porta inserti/accessori (previsto anche in configurazione standard)



Borsa porta PAD



Sacca porta oggetti



Rivestimento igienico protettivo per maniglioni e PAD



Fascia poggipiedi



Valigetta in plastica porta inserti/accessori

Accessori

Immagine prodotto: le immagini sono puramente illustrative

